

Vital•Ultra^{MC}, une solution pour plus de 80% des femmes!

Plusieurs éléments de notre mode de vie, tels le stress, le manque d'activité physique, de mauvaises habitudes alimentaires et même le port de souliers à talons hauts, nuisent à la circulation sanguine et lymphatique. Or, les troubles circulatoires sont la principale cause de la cellulite, un problème qui affecte plus de 80% des femmes. Celles-ci sont d'ailleurs prêtes à déboursier des sommes considérables pour se débarrasser de cette vilaine «peau d'orange».

Le Vital•Ultra représente l'avancée technologique ultime pour réduire visiblement l'apparence de la cellulite, redéfinir les contours, amincir la silhouette et améliorer la circulation. Cet appareil moderne combine 4 technologies qui ont déjà fait leurs preuves, soit la radiofréquence, l'infrarouge, la luminothérapie et la vacuodermie.

Dans le domaine de l'esthétique, seule la technologie mixte du Vital•Ultra permet de combattre efficacement la cellulite.

Radiofréquence

Chacune des 2 pièces à main du Vital•Ultra possède 2 émetteurs de radiofréquence 3 MHz. La radiofréquence est la méthode idéale pour se débarrasser des amas de cellules adipeuses. Les ondes produites par le Vital•Ultra créent des vibrations dans les tissus qui, ensuite, se transforment en chaleur. Sous l'action de la vibration et de la chaleur, la membrane entourant les adipocytes se brise et les cellules se compriment, évacuant les toxines et l'eau qui y sont emprisonnées. Ces deux éléments sont ensuite absorbés par le système lymphatique, dont l'action est, elle aussi, stimulée par la chaleur.

Après un traitement à la radiofréquence Vital•Ultra, l'apparence de la cellulite est visiblement réduite et la silhouette est amincie.

Luminothérapie et infrarouge

Les pièces à main du Vital•Ultra contiennent également 16 diodes infrarouge et 8 diodes électroluminescentes aux couleurs variant entre le rouge, le jaune, le vert et le bleu. La lumière colorée stimule les cellules et l'organisme, afin de corriger les imperfections. Simultanément, la lumière infrarouge dilate les vaisseaux sanguins et lymphatiques et régénère les fibres élastiques dans le derme, ce qui favorise la circulation et diminue le risque de formation de la cellulite. Les diodes, combinées à la radiofréquence, rehaussent donc l'efficacité du traitement.

Chaque couleur est associée à un mode de traitement spécifique pour cibler à la perfection tous les types de cellulite.

Vacuodermie

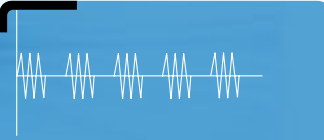
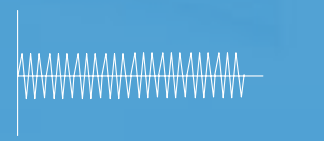
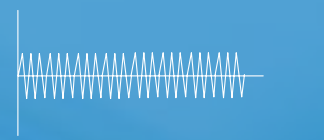

Un avantage indéniable du Vital•Ultra est qu'il offre la vacuodermie. Cette technique permet de réaliser le massage mécanique combinant l'aspiration et le roulé-palpé. Ces mouvements imitent les effets des contractions musculaires naturelles qui permettent à la lymphe de circuler, en plus d'amener les toxines libérées par la radiofréquence vers les ganglions responsables de l'élimination des déchets. De plus, la vacuodermie entraîne une redistribution de la graisse sous-cutanée, favorisant ainsi un remodelage des contours.

Appliquée seule ou en combinaison avec les traitements de radiofréquence, la vacuodermie Vital•Ultra permet un drainage-remodelage ultra-efficace et joue un rôle majeur dans l'élimination et la prévention de la cellulite.

Des traitements personnalisés

Grâce aux programmes spécifiques du Vital•Ultra, vous pouvez traiter chaque cliente selon le type de cellulite qu'elle présente, pour ainsi offrir des soins personnalisés, optimaux et évolutifs.

Programmes spécifiques Vital•Ultra^{MC}

Programme 1	Cellulite dure	Radiofréquence 3 MHz pulsée + infrarouge 910 nm modulé à 5 KHz + lumière rouge.	
Programme 2	Cellulite oedémateuse	Radiofréquence 3 MHz continue + infrarouge 910 nm modulé à 3,5 KHz + lumière jaune.	
Programme 3	Cellulite molle	Radiofréquence 3 MHz continue + infrarouge 910 nm modulé à 4,5 KHz + lumière verte.	
Programme 4	Cellulite molle avec capillaires	Radiofréquence 3 MHz pulsée rapide + infrarouge 910 nm modulé à 3,5 KHz + lumière verte et bleue.	



Avant



Après

5 traitements Vital•Ultra^{MC}

Le Vital•Ultra vous permet d'offrir à votre clientèle une combinaison unique de soins anticellulite, soit la radiofréquence, la vacuodermie, la luminothérapie et la lumière infrarouge. Ces soins contribuent à réduire la cellulite, redéfinir les contours, affiner la silhouette, éliminer l'enflure et procurer une sensation de bien-être. Dès les premiers traitements, votre cliente remarquera une perte de quelques centimètres aux régions traitées.

Faites découvrir à votre clientèle, le soin silhouette par excellence Vital•Ultra!